

BIOCIDE H

Hand Disinfectant



📍 جاده قدیم کرگان گردکوی، ناحیه صنعتی



۰۹۱۲۴۰۴۸۴۲۴

امام خمینی، قطعه ۱۳

ASHTAD

محصول با شرکت رامین پلیمری اشتاد هیرکان

مددکاری خانواده

Hand Disinfectant



موارد مصرف

- موثر در طیف وسیعی از ویروس ها بکتری ها، قارچ ها
- جلوگیری از خشکی بیش از حد و عوارض پوستی
- دارای افزودنی های مجاز جهت سلامت پوست دست
- توصیه شده جهت استفاده بخش های بستری و درمانی
- حاوی مواد نرم کننده محافظ پوست
- کاهش زمان ضدعفونی و جایگزین مناسب برای
- شستشوی دست ها
- اثر میکروبی پایدار
- مقرون به صرفه
- بوی مطبوع

بایو ساید اچ باعث بهبود شرایط بهداشتی و جلوگیری از شیوع میکروب ها و ویروس ها به سطوح خصوصاً سطح دست و غیره می شود. محلول و اسپری ضدعفونی کننده خوب باید توانایی لازم بصورت گسترده داشته باشد تا میکروب ها و ویروس هایی که به تازه شیاع شده است را در زمان کوتاهی نابود کند و اثری از آنها روی سطوح بجا نگذارد. اکثر میکروب ها و ویروس ها چون به راحتی با پاک کننده های ساده از بین نمی روند برای نابود شدن نیاز به محلول و اسپری ضدعفونی که کاربری راحت تری دارند می باشد.

توكييات محصول
انتول طبي جي ڏسيل ڌي مثال آهيو ته ڪار ايدنگز هڪريدين
ٻولين ٺهول انوکسسيٽل، ڪليسيورين، آب ديونيزه رنگ ۽
اسانس جات آريشي ۽ بهادشتي

دستور العمل مصرف

برای استفاده صحیح از ضدعفونی‌کننده های دست ابتدا مقدار توصیه شده بر روی جلد محصول را در گف دست قرار دهید. سپس دستان خود را به هم بمالید تا محصول تمام دست از جمله بین انگشتان را مانند زمانی که دست های خود را می شویید پوشش دهد و سپس سیر کنید تا محلول در مرقن هوا خشک شود

BIOCIDE AMINO

High Level Disinfectant



SHTAD

جاده قدیم کرگان کردهکوی، ناحیه صنعتی، امام خمینی، قلهه ۱۳

۰۹۱۲۴۰۴۸۴۲۴

محصول شرکت رامین باسیمی اشناد هیرکان

بایوساید آمینو

ضد عفونی کننده سطح بالا

BIOCIDE AMINO

High Level Disinfectant



محصول بایوساید آمینو به دو صورت کنسنتره و آماده به مصرف تولید و توزیع میگردد. این محصولات به عنوان ضد عفونی کننده و استریل کننده کلیه سطوح عفونی و عمومی واحدهای پزشکی و دندان پزشکی بر پایه ترکیبات آمونیوم چهار تایی توانایی نابودی طیف وسیعی از میکروبیها، انواع قارچ ها، باکتریهای گرم و ویروس های پوششدار مانند HIV, HBV, HCV را دارا میباشد و علاوه بر اثر ضد عفونی کنندگی خاصیت پاک کنندگی نیز دارد. استفاده از محلول ضد عفونی کننده بایوساید آمینو کنسنتره به دلیل رقیق سازی به هنگام مصرف محصولی مقرون به صرفه جهت استفاده در بیمارستان ها و مراکز درمانی میباشد. در صورتی که محلول رقیق شده دچار آلودگی ظاهری شد محلول جدید آماده نموده و از محلول قبلی استفاده نمایند.

ترکیبات محصول: دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید، ایزوپروپیل الکل، کلر هگزیدین، بنزیل آمونیوم کلراید، کریوگسی متیل، سلولز، آب دیونیزه

دستور العمل مصرف محلول آماده


دستمال و تی را به محلول بایوساید آمینو آماده به مصرف آغشته نموده و سپس سطح مورد نظر را بدون نیاز به آبکشی ضد عفونی نمایید.

دستور العمل مصرف کنسنتره

محلول بایوساید آمینو را با توجه به آلودگی محیط تا ۵ در صد رقیق سازی نمایید (۵ سی سی محلول بایوساید آمینو در ۹۵ سی سی آب) سپس با تی و یا دستمال محل مورد نظر را ضد عفونی نمایید و جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص رقیق سازی محلول به سایت شرکت مراجعه فرمایید.

BIOCIDE PRA 1%

Surface Disinfectant

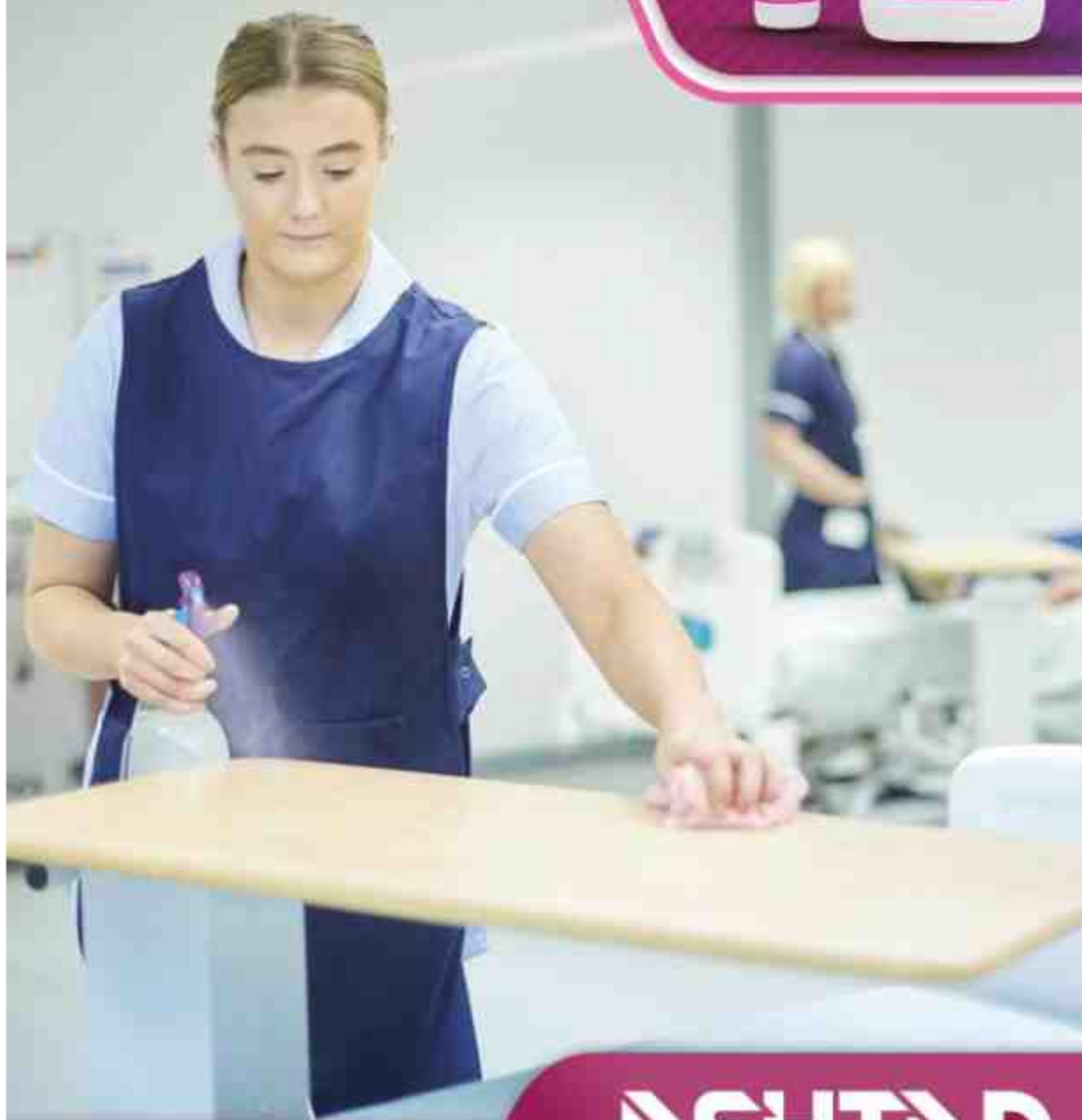

SHTAD

جاده قدیم گرگان گردکوی، ناحیه صنعتی، امام خمینی، منطقه ۱۳

۰۹۱۲۴۰۴۸۴۲۴

محصول شرکت رامین پلیمری انستیتاد هیرکان

بایوساید پرا ۱٪

ضد عفونی کننده سطوح (کنسانتره)

BIOCIDE PRA 1%

Surface Disinfectant



موارد مصرف

عملکرد بایوساید پرا بر اساس اکسیداسیون است. در حقیقت این ماده غشای بیرونی سلولهای باکتریایی آندوسپورها، مخمرها و اسپورهای کپک را اکسید کرده و از این طریق ضد عفونی می کند.

یکی از دلایل استفاده از بایوساید پرا در مصارف بیمارستانی این است که این محلول ضد عفونی کننده بیش از ۴۰ واکنش شیمیایی در مقابل میکروارگانیسم ها انجام می دهد. در نتیجه مقاومتی در این محلول ایجاد نمی شود و نیاز به تعویض دوره ای مواد ضد عفونی کننده نیست.

بایوساید پرا یک محلول ضد عفونی کننده سطح پاک بر پایه ترکیب پایدار شده پراکسی استیک اسید و هیدروژن پراکسید است. این محلول برای ضد عفونی سطح بالای سطوح عفونی بیمارستان ها و مراکز درمانی، استریل کردن ماشین های همودیالیز (شستن اینکه مصرف مواد ضد رسوب این ماشین ها را کاهش می دهد) و جهت ضد عفونی موثر علیه مایکوباکتریوم، ویروس HIV و HBV، سالمونلا و دیگر عوامل عفونت را بدون اثرات مضر تنفسی برای کاربران است.

از این محلول می توان برای مقاومت میکروبی در برابر میکرو ارگانیسم ها استفاده می شود.


ترکیبات محصول:
پراکسی استیک اسید - هیدروژن پراکسید

دستورالعمل مصرف

- ضد عفونی سطوح عمومی و کف:
محلول با رقت ۱:۳۰۰ به مدت ۱۰ دقیقه به صورت اسپری یا اسفنج کشی با استفاده از زمین شوی در همان روز استفاده نمایید.
محلول با رقت ۱:۵۰۰ به مدت ۱۰ دقیقه به صورت اسپری یا اسفنج کشی با استفاده از زمین شوی در همان روز استفاده نمایید.
محلول با رقت ۱:۱۰۰۰ به مدت ۲۰ دقیقه به صورت اسپری یا اسفنج کشی با استفاده از زمین شوی در همان روز استفاده نمایید.
محلول با رقت ۱:۵۰۰۰ به مدت ۳۰ دقیقه به صورت اسپری یا اسفنج کشی با استفاده از زمین شوی در همان روز استفاده نمایید.
- ضد عفونی سطوح اتاق عمل، ICU و ...:
محلول با رقت ۱:۴۰۰۰ به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه به صورت اسپری یا اسفنج کشی در همان روز استفاده نمایید.

BIOCIDE RAPID

Surface and Tools Disinfectant

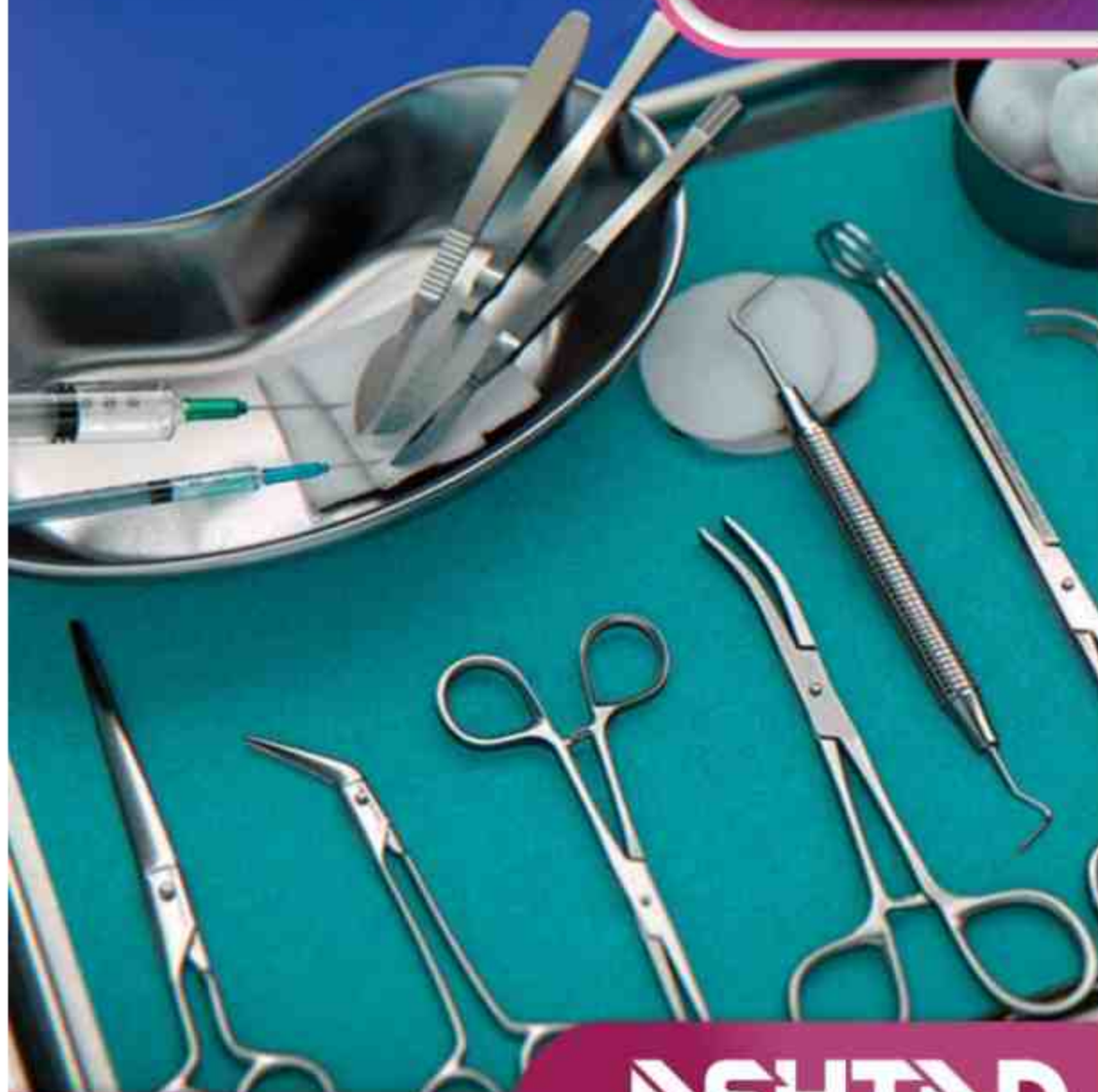

SHITAD

📍 جاده قدیم گرگان کردکوی، ناحیه صنعتی، امام خمینی، قطعه ۱۳

☎ ۰۹۱۲۴۰۴۸۴۲۴

محصول شرکت رامین طبیبی اشناد هیرکان

بایوساید رپید

ضدعفونی کننده سطوح و تجهیزات

BIOCIDE RAPID

Surface and Tools Disinfectant



موارد مصرف

- ضدعفونی کننده و استریل کننده کلیه سطوح و لوازم:
- بیمارستانی و بهداشتی
- ضد عفونی کننده سطوح حساس و نیمه حساس
- بیمارستان ها و اماکن بهداشتی
- (اتاق عمل، بخش های عفونی و ...)
- ضد عفونی کننده سیستم های اسفنج معکوس، کارتریج های
- کاتیونی و کلیه سیستم های مربوطه
- ضد عفونی کننده دستگاه های آندوسکوپ، کولونوسکوپ،
- برنئوسکوپ و ...

بایوساید رپید برای ضدعفونی سطوح عفونی بیمارستانی و دیگر مراکز درمانی طراحی شده است و با فرمولاسیون منحصر به فرد خود مناسب برای از بین بردن طیف گسترده ای از میکرو ارگانیسم ها است. این محصول بر حسب رقت مصرفی توانایی از بین بردن کلیه میکرو ارگانیسم ها شامل ویروس ها، باکتری ها، کپک ها و مخمرها را دارد. دلیل عدم ایجاد مقاومت میکروبی در مقابل این محصول، انجام بیش از ۳۰ واکنش شیمیایی توسط این ترکیب در مقابل میکروارگانیسم ها است. بنابراین با استفاده از آن دیگر نیازی به تعویض دوره ای مواد ضدعفونی کننده نخواهد بود. بایوساید رپید در طیف وسیعی از درجه حرارت (PH) و در حضور مواد آلی تاثیر گذار است. همچنین مقاومت میکروبی در مقابل آن شکل نمی گیرد و روی سطوح آلوده به مواد باقی و خون قدرت اثر خود را حفظ می نماید. ترکیبات محلول: آبزیوپریل، الکل، اتیل الکل، طبی، استاتس آرایشی و بهداشتی.

دستورالعمل مصرف

سطح مورد نظر را تمیز کرده و از فاصله ۲۰ سانتی متری محلول بایوساید رپید را اسپری نموده، صبر کنید تا عمل ضدعفونی انجام شود و یا محل آغشته به محلول بایوساید رپید را با پارچه ای خشک و تمیز دستمال کشیده و نیازی به آبکشی ندارد.

